


XTRUDER™

URZĄDZENIE DO ŁATWEJ I SZYBKIEJ APLIKACJI
ŻYWIC I WYPEŁNIACZY UBYTKÓW KOSTNYCH

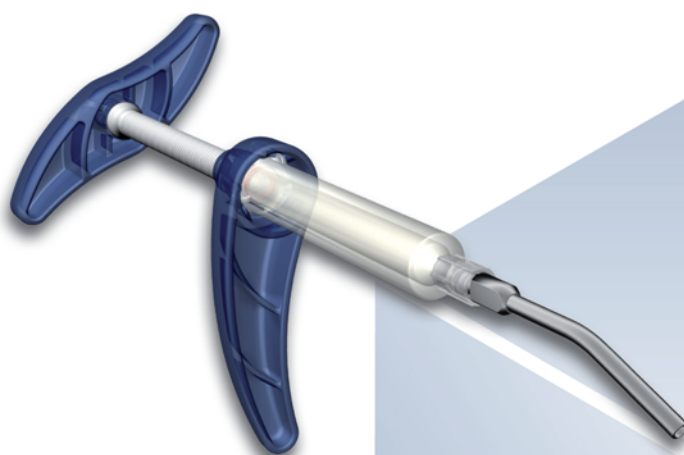

XTRUDER jest nowym urządzeniem do podawania żywic akrylowych i wypełniaczy ubytków kostnych przygotowanych przy użyciu mieszalnika **SHAKIT**.


ZALETY:

- łatwy do napełniania

Dzięki pierścieniowi zgarniającemu, wszystko co należy zrobić to wprowadzić strzykawkę Xtruder do Shakit, a produkt wpłynie do strzykawki, aż do jej całkowitego wypełnienia (maksymalna pojemność: 10ml).

- łatwy do zastosowania

Specjalnie zaprojektowany kształt i rozmiar ergonomicznego uchwytu pozwala na bardzo łatwe wyciskanie żywic o małej i średniej, a nawet wysokiej lepkości.

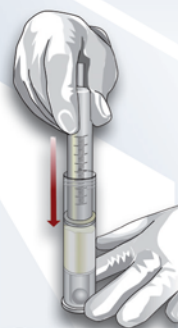


TECRES® 
Advancing High Technology

www.tecres.it

URZĄDZENIE DO ŁATWEGO MIESZANIA ŻYWIC I WYPEŁNIACZY UBYTKÓW KOSTNYCH

WŁAŚCIWOŚCI:








- z **Shakit** materiał może być mieszany poprzez potrząsanie, lub użycie szpatuły*
- mieszanie poprzez potrząsanie nawet wysokiej lepkości materiałów jest ulepszone dzięki obecności kulki, która uderza wewnątrz przyrządu.

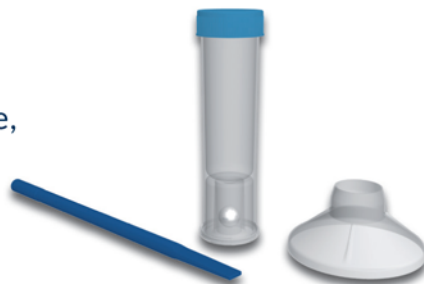

* Shakit miesza przez potrząsanie do 20g proszku o niskiej lub średniej lepkości i do 10g proszku o lepkości wysokiej.

FAZY PRZYGOTOWANIA Shakit + XTRUDER

- 1 Wsypać proszek, a następnie składnik płynny do pojemnika i mocno zamknąć pokrywę.
- 2 Wstrząsać energicznie pojemnikiem na co najmniej 1 minutę do całkowitego zmieszania.
- 3 Sprawdzić, czy pierścień zgarniający jest połączony z końcówką strzykawki.
- 4 Powoli włożyć strzykawkę do samego końca pojemnika **Shakit**, aby go całkowicie wypełnić.
- 5 Wyjąć strzykawkę, upewniając się, że pierścień zgarniający schodzi ze strzykawki.
- 6 Podłączyć strzykawkę z uchwytem, przykręcając do momentu, kiedy słychać kliknięcie.
- 7 Połączyć śrubę wyciskającą z uchwytem
- 8 Połączyć kaniulę do aplikacji

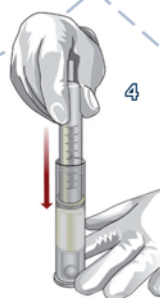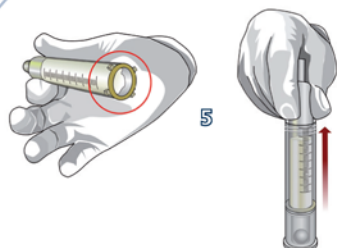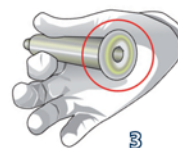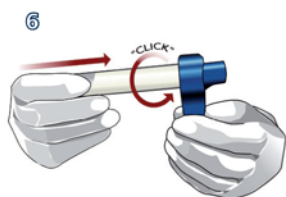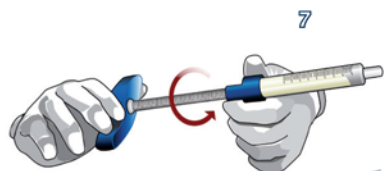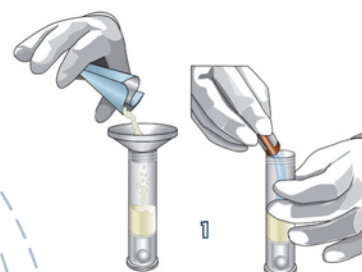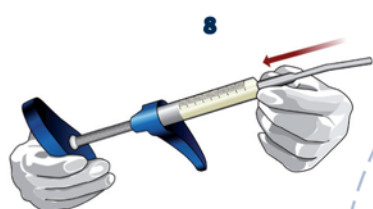

KOD	PRODUKT
ASA0390	XTRUDER
ASA0380	SHAKIT

