

Bibliografia

1. Foo LS et al. **Results, experience and technical points learnt with use of the SKy Bone Expander kyphoplasty system for osteoporotic vertebral compression fractures: a prospective study of 40 patients with a minimum of 12 months of follow-up.**
Eur Spine J. 2007 Nov;16(11):1944-50.
2. Mazzantini M et al. **Long-term prospective study of osteoporotic patients treated with percutaneous vertebroplasty after fragility fractures.**
Osteoporos Int. 2011 May;22(5):1599-607.
3. Mpotsaris A et al. **Percutaneous vertebroplasty in vertebral compression fractures of benign or malignant origin: a prospective study of 1188 patients with follow-up of 12 months.**
Dtsch Arztebl Int. 2011 May;108(19):331-8. Epub 2011 May 13.
4. Pizzoli A et al. **Percutaneous CT-guided vertebroplasty in the management of osteoporotic fractures and dorsolumbar metastases.**
Orthop Clin North Am. 2009 Oct;40(4):449-58, vii.
5. Nivbrant B, Kärrholm J, Röhrl S, Hassander H, Wesslén B. **Bone cement with reduced proportion of monomer in total hip arthroplasty: preclinical evaluation and randomized study of 47 cases with 5 years' follow-up.**
Acta Orthop Scand. 2001 Dec;72(6):572-84.
6. Leggat PA et al. **Surgical applications of methyl methacrylate: a review of toxicity.**
Arch Environ Occup Health. 2009 Fall;64(3):207-12.


B1C141 rev 00/14

Informacje do zamówienia	
REF	OPIS
13C2040	Mendec Spine HV System



TECRES S. p. A.
Via A. Doria, 6 - Sommacampagna - Verona (Italy)
tel. +39 045 92 17 311 - fax +39 045 92 17 330
www.tecres.it - info@tecres.it

distributed by:

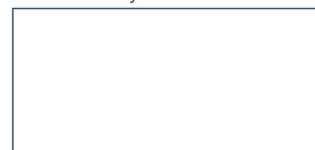


www.tecres.it

żywica do kręgosłupa

MENDEC[®] Spine HV SYSTEM



Pierwszy system
do mieszania
“wszystko w jednym”
wypełniony nową
żywica do kręgosłupa,
o wysokiej lepkości

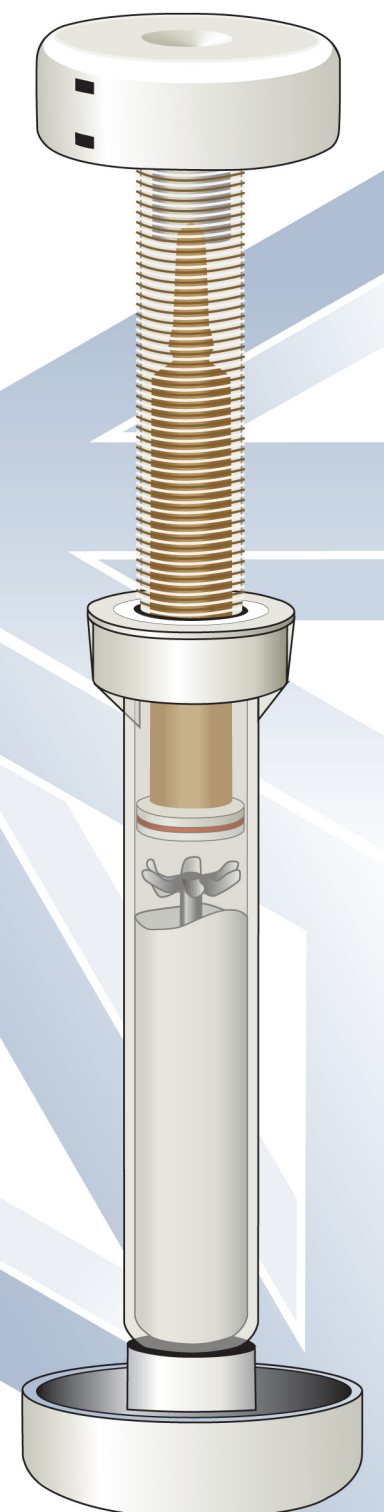

www.tecres.it

Wysoka lepkość – wszystko w jednym urządzeniu

Mendec Spine HV System to nowy zamknięty mikser zawierający zarówno proszek jak i płyn. Tecres kontuuje historię swoich nowatorskich rozwiązań, prezentując nowy produkt w dziedzinie kręgosłupa. Mendec Spine HV System dumnie podąża za oryginalnym patentem Cemex System, pierwszym cementem kostnym, wszystko w jednym.

Zalety:

Oszczędność czasu

Gotowe do użycia w ciągu 1 minuty. Nie ma czasu oczekiwania. Dzięki nowej formule HV, która pozwala także na przedłużenie czasu pracy do 14 minut *.

Pełna kontrola


Nowa formuła, o wysokiej lepkości i widoczna dla promieni rentgenowskich (30% siarczanu baru) została opracowana, aby zapewnić pełną kontrolę w trakcie wtlaczania. Specjalna formuła pozwala pracować bezpiecznie, krok po kroku, przez dłuższy czas.

Wiarygodne wyniki

Najwyższa jakość żywicy, przez cały czas, dzięki opatentowanej technologii systemu mieszania.


Przyjazny użytkownikowi

Tylko jedno urządzenie, wszystko w środku. Uniwersalna końcówka typu Luer lock pozwala na połączenie z urządzeniami podającymi firmy Tecres lub innymi kompatybilnymi.

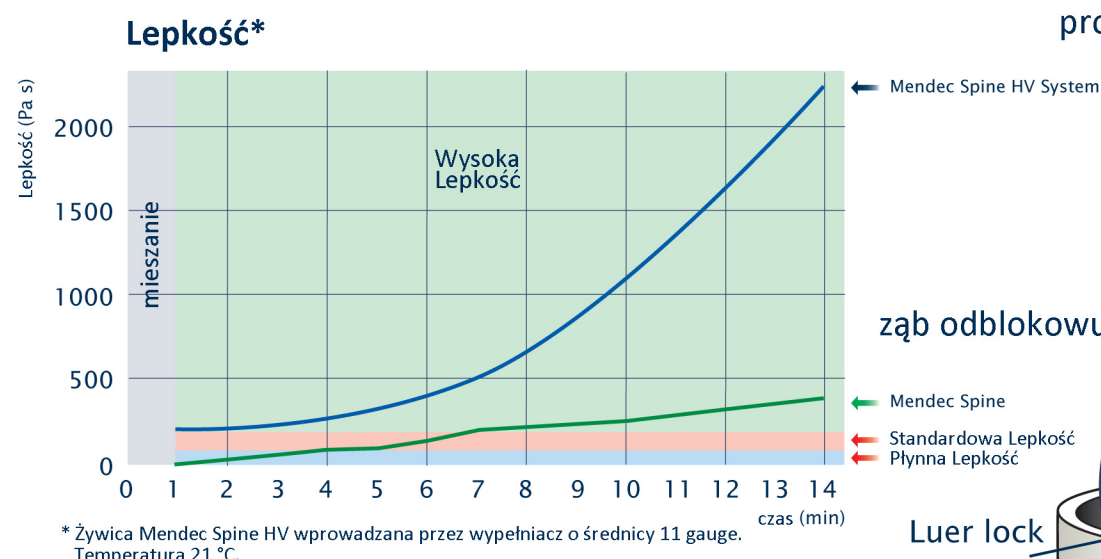

Żadnego czasu oczekiwania

Więcej czasu na zastosowanie przy pożądanej lepkości

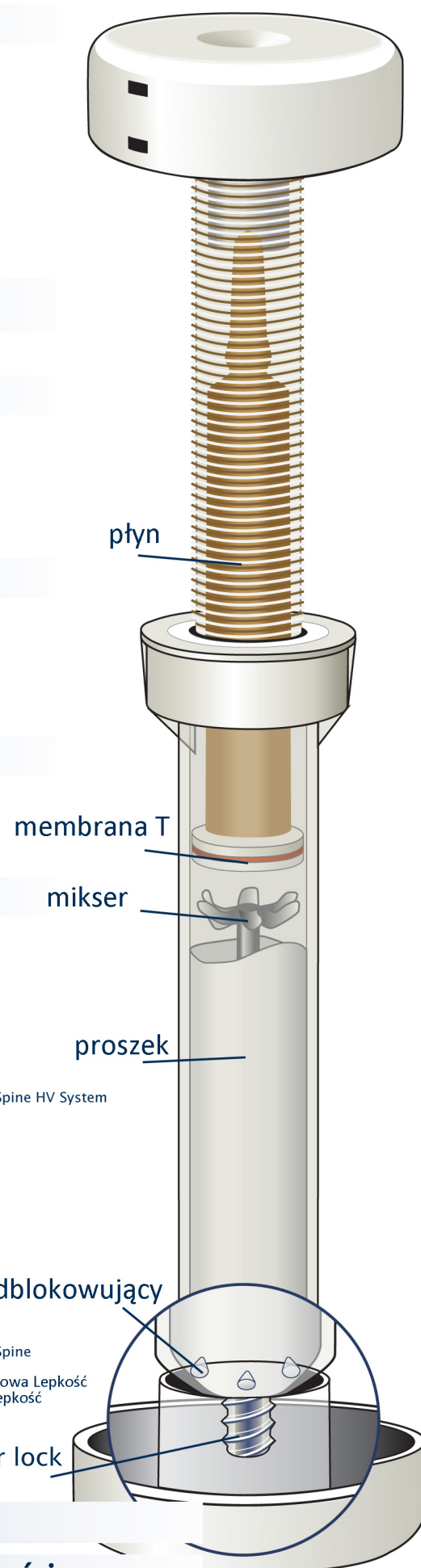

Bezpieczniejsze dla zespołu medycznego

Żadnych oparów, żadnych odłamków szkła.

System ten jest całkowicie uszczelniony, chroni operatorów przed narażeniem na opary monomeru. Bez ręcznego łamania szklanej ampułki, bez ryzyka skażenia, bez odłamków szkła. Wszystko to dzięki wyjątkowej T membranę Tecres.



Bezpieczniejsze dla pacjenta

Nie ma ryzyka skażenia.

Operatorzy nie mają kontaktu ze składnikami w trakcie procesu przygotowywania żywicy, ani też elementy nie stykają się ze środowiskiem.

